


VECTOdrill™.

Optimale Voraussetzung für Primärstabilität und zuverlässige Osseointegration.

Natürlich von Thommen Medical.

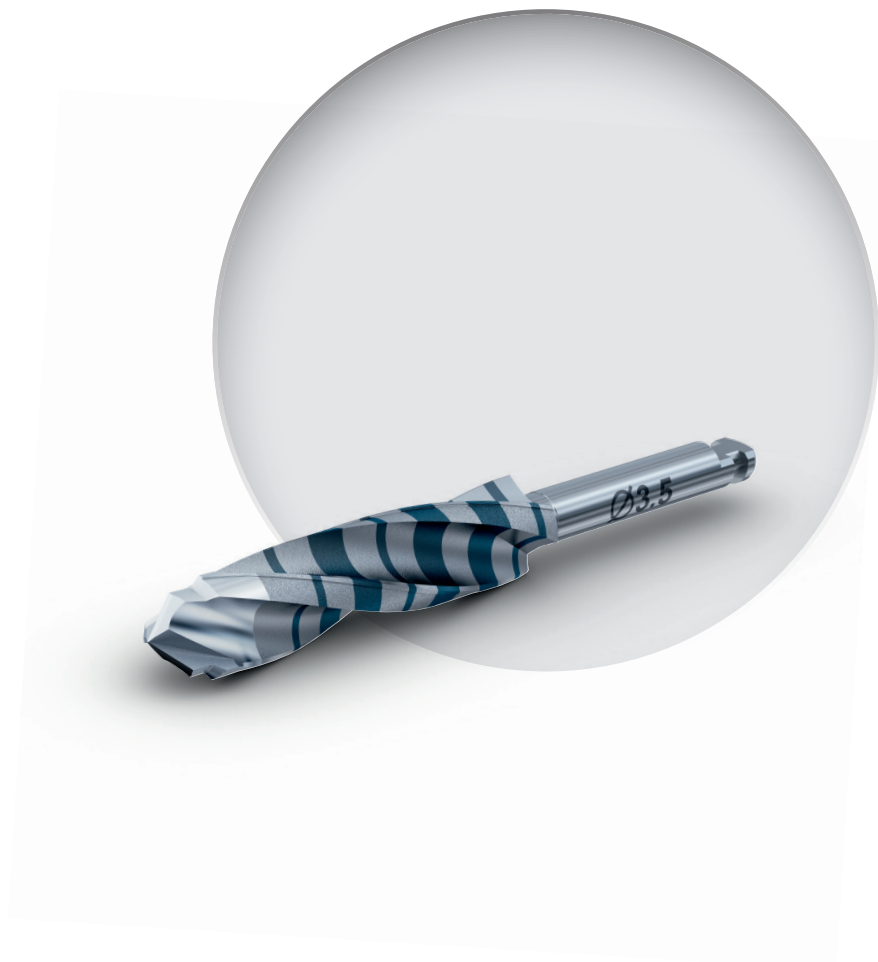


Richtungsweisend.

Das einzigartige VECTOdrill™ Bohrer System, bestehend aus exakt aufeinander abgestimmten Bohrern, ermöglicht eine atraumatische Knochenpräparation und schafft optimale Voraussetzungen für Primärstabilität und zuverlässige Osseointegration.


«Einfach ein angenehmes Arbeiten! Präzise Geführt,
mit exzellenter Laufruhe zur Perfekten Osteotomie.»

PD Dr. Dr. med. D. Rohner, CFC Hirslanden, Aarau

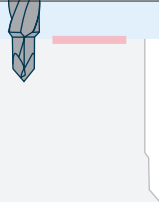

Pilotbohrung

- **ohne Ankörnung**
Definition der Implantatposition durch integrierte Zentrierspitze
- **präzise**
festlegen der Bohrtiefe und -achse durch Pilotbohrer
- **leistungsfähig**
herausragende Schneideigenschaften

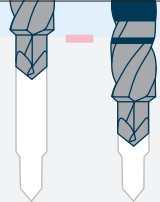

Sequentielle Aufbereitung

- **kontrolliert**
Führungsspitze positioniert Bohrer sicher im Bohrloch des vorhergehenden Bohrers
- **geführt**
entlang definierter Bohrachse
- **laufruhig**
mehrleppige Bohrer-geometrie



Selbstschneidendes Implantat

- **drucklos**
perfekte Kongruenz von Implantatbett zu Kerndurchmesser des Implantats
- **ausgezeichnete Primärstabilität**
selbstschneidende Gewindeflanken fixieren das Implantat im Knochen

Die einzigartigen VECTOdrill Bohrer schaffen zusammen mit den selbstschneidenden Implantaten und der superhydrophilen Oberfläche INICELL® die optimalen Voraussetzungen für eine zuverlässige Osseointegration.

VECTOdrill™ Produktelinie

VECTOdrill™ Bohrer für den Einmalgebrauch

rostfreier Stahl



- ready to use

Einmalgebrauch



Auslieferung **steril.**

Verfügbare Längen:
29 mm, 34 mm, 40 mm

VECTOdrill™ Bohrer für den Mehrfachgebrauch

rostfreier Stahl



- kosteneffiziente Mehrfachanwendung
- sehr gute Verschleiss- und Korrosionsbeständigkeit

Mehrfachgebrauch
max. 20 Aufbereitungszyklen*

Auslieferung **unsteril.**
Muss vor jeder Anwendung aufbereitet werden

Verfügbare Längen:
29 mm, 34 mm, 40 mm

VECTOdrill™ Keramikbohrer für den Mehrfachgebrauch

hochwertige Mischkeramik
ATZ (Alumina toughened zirconia)



- exzellente Bioverträglichkeit
- beste Verschleissbeständigkeit
- ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit

Mehrfachgebrauch
max. 20 Aufbereitungszyklen*

Auslieferung **unsteril.**
Muss vor jeder Anwendung aufbereitet werden

Verfügbare Längen:
29 mm, 34 mm

* Ein Aufbereitungszyklus entspricht der Anwendung des Bohrers an einem Patienten (Chirurgie, Reinigung und Sterilisation). Weitere Informationen entnehmen Sie der Aufbereitungsanleitung THM61131, «www.ifu-tm.com/THM61131».

HEADQUARTERS

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Schweiz
Tel. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com

VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

BENELUX

Thommen Medical Benelux B.V.
Dierenriem 1
3738 TP Maartensdijk | Niederlande
Tel. +31 30 68 68 468
Info.benelux@thommenmedical.nl

CHINA

Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.
Room G | Floor 15th | Plaza JiaFa | No.1
Lane 129 | DaTian Road | JingAn District
Shanghai | China
Tel. +86 21 62723077
Fax +86 21 62175264

DEUTSCHLAND

Thommen Medical Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
79576 Weil am Rhein | Deutschland
Tel. +49 7621 422 58 30
Fax +49 7621 422 58 41
info@thommenmedical.de

FINNLAND

Vector Laboratories Oy
Engelinaukio 8 B
00150 Helsinki | Finnland
Tel. +358 400 940 700
labs@vektor.fi

FRANKREICH

Thommen Medical France
10 avenue Gabriel Pierné
77680 Roissy-en-Brie | Frankreich
Tel. +33 1 83 64 06 35
Fax +33 3 89 33 52 53
infos@thommenmedical.fr

HONGKONG

Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.
Level 13, 68 Yee Wo Street
Causeway Bay | Hongkong
Tel. +852 530 876 41

ITALIEN

Dental Trey S.r.l.
Via Partisani, 3
47016 Fiumana | Predappio (FC) | Italien
Tel. +39 0543 929111
Fax +39 0543 940659
implantologia@dental Trey.it
www.dental Trey.it

JAPAN

J. Morita Corporation
3-33-18, Tarumi-cho
Suita | Osaka 564-8650 | Japan
Tel. +81 6 6384 6921
Fax +81 6 6384 6746
www.morita.com

KROATIEN

Futura Dental d.o.o.
Kralja Zvonimira 108
10 000 Zagreb | Kroatien
Tel. +385 91 6814 860
info@futura-dental.hr
www.futura-dental.hr

LITAUEN/LETTLAND

ČERNIKIS MEDICAL PROJECTS, UAB
Šiaurės prospektas 5B | Kaunas
Litauen LT-49191
Tel. +370 37 201072
Mobile +370 65 771550
info@cmp.lt
www.cmp.lt

NAHER OSTEN

Star Science International GmbH
Jupiterstrasse 57
3015 Bern | Schweiz
Tel. +41 31 941 07 31
Fax +41 31 941 07 33
star.science@bluewin.ch

NORWEGEN

Novus Dental AS
Johannes Bruns gate 5
0452 Oslo | Norwegen
Tel. +47 951 07 007
post@novusdental.no
www.novusdental.no

ÖSTERREICH

Thommen Medical Austria GmbH
Mühlgasse 3
2322 Zwölfaxing | Österreich
Tel. +43 660 2011953
info@thommenmedical.at

POLEN

C.WITT DENTAL Sp. z o. o.
Ul. Granitowa 10
87-100 Toruń | NIP 951-15-08-371 | Polen
Tel. +48 56 623 61 23
biuro@cwittdental.pl
www.cwittdental.pl

RUSSISCHE FÖDERATION

CIS - JSC Geosoft
Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.
Moscow, 129626 | Russian Federation
Tel. +7 495 663 22 11
thommenmedical@geosoft.ru

SCHWEIZ

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Schweiz
Tel. +41 32 644 30 20
Fax +41 32 644 30 25
info@thommenmedical.ch

SINGAPUR

FONDACO Pte Ltd
7 Kaki Bukit Road 1, #03-06
Eunos Techno Link
Singapur 415937 | Singapur
Tel. +65 6392 2806
Fax +65 6392 1296
fondaco@fondacosg.com

SPANIEN/PORTUGAL

Thommen Medical Ibérica
C/ Los quintos n 1
03350 Cox (Alicante) | Spanien
Tel. +34 96 536 10 20
Mobile +34 606 99 78 34
info@thommeniberica.com

SÜDKOREA

KMbio
02 Ho, 129, Dongseo-daero
Seobuk-gu, Cheonan-si
Chungcheonnam-do
Republic of Korea
Tel. +82 070 3141 2875
kmbio149@naver.com

TAIWAN

En-Jye International Co., Ltd.
No. 18 | Lane 177 | Sec 3 | Chengde Rd.
Taipei, 103 Taiwan
Tel. +886 2 2585 1669
Fax +886 2 2585 0892
enjye168@gmail.com

TSCHECHIEN

C. Witt Dental spol. s r.o.
Cihlářská 643/19
602 00 Brno
Tel. +420 739 043 449
helena.novak@cwittdental.cz

TÜRKEI

Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.
Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe
Şişli 34394 İstanbul | Türkei
Tel. +90 212 2727577
Fax +90 212 2727628
info@bioport.com.tr
www.bioport.com.tr

USA/KANADA

Thommen Medical USA L.L.C.
1375 Euclid Avenue | Suite 450
Cleveland OH 44115 | USA
Tel. +1 866 319 9800 (toll free)
Fax +1 216 583 9801
info.us@thommenmedical.com
orders.us@thommenmedical.com